

## FICHE TECHNIQUE

**Art N°: 75.562400**

Fiche créée le: 12/06/08

Par: Jean-Pierre KROEMER



**Désignation commerciale :** Flacon 100ml tronconique, polypropylène, cape à vis. Stérile avec témoin d'intégrité et système de transfert intégré pour utilisation avec la V-Monovette® Urine.

**Application :** Flacon pour prélèvements d'urine et transfert.

**Fabricant :** SARSTEDT AG & Co D-51582 NUMBRECHT – Allemagne  
Certification ISO 9001 Version 2008

### Caractéristiques produit :

**Description :** Flacon pour prélèvements d'échantillons, en polypropylène, cape à vis jaune avec système de transfert intégré pour utilisation avec la V-Monovette® Urine.  
Stérile avec témoin d'intégrité par étiquette sur chaque flacon

**Normes et Directives :** Dispositif Médical de Diagnostic In vitro  
conforme à la Directive Européenne 98/79 CE



## Art N°: 75.562400

<b>Matière :</b>	Corps	Polypropylène haute transparence (PP)
	Cape	Polyéthylène haute densité (HD-PE) + colorant jaune
<b>Dimensions :</b>	Hauteur totale	73mm
	Diamètre haut	62mm
	Diamètre bas	47mm
	Volume utile	100ml
	(graduations de 10 à 100ml par 10ml)	
<b>Conditionnement :</b>	Carton de 200 flacons	
<b>Qualité bactériologique :</b>	Stérile par irradiation	
<b>Numéro de lot :</b>	Situé sur chaque carton et flacon (sur l'étiquette témoin d'intégrité)	
<b>Date limite d'utilisation</b>	36 mois sortie de production	
	Située sur chaque carton et flacon (sur l'étiquette témoin d'intégrité)	

### Mode d'emploi – Limites d'utilisation – Recommandations :

Article à Usage Unique

Stocker à température ambiante : 20°C +/- 5°C, dans un endroit sec, à l'abri des UV

L'étiquette papier collée sur le corps du flacon et sur le couvercle sert de témoin d'intégrité de stérilité. La stérilité du flacon est garantie tant que cette étiquette est intacte. Elle comporte le numéro de lot et la date de péremption.

### Attention !

Laisser les doigts à l'extérieur du dispositif de transfert


Risque de blessure causée par l'aiguille du dispositif de transfert

Le bouchon du dispositif de transfert ainsi que la canule de transfert doivent être immédiatement mis au rebut dans un container à déchets adapté



## V-Monovette® Urine System

Gebrauchshinweis · User Guide · Mode d'emploi · Gebruiksaanwijzing · Istruzioni d'uso · Instrucciones de uso · Manual de utilização

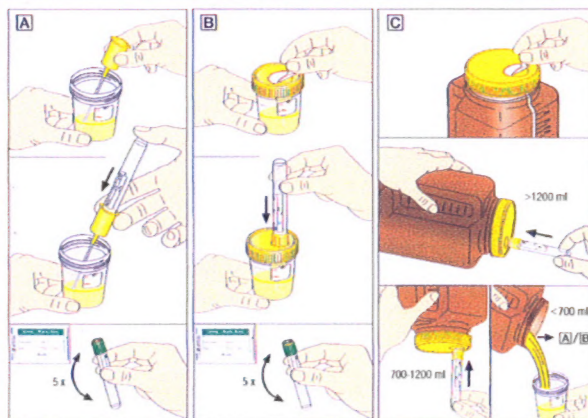

**Achtung:** Bitte nicht in den Entnahmehereich greifen. Gefahr von Nadelstichverletzung! Deckel mit Entnahmeeinheit und Transfereinheit sofort in eine geeignete Entsorgungsbox geben.

**Caution:** Make sure to keep your fingers safely away from the transfer device. Risk of needlestick injury! Immediately discard the cap with the integrated transfer device and the transfer straw in a suitable disposal box.

**Attention:** Laissez les doigts à l'extérieur du dispositif de transfert. Risque de blessure causée par l'aiguille du dispositif de transfert! Le bouchon du dispositif de transfert intégré ainsi que la canule de transfert doivent être immédiatement mis au rebut dans un container à déchets adapté.

**Attentie:** Blijf met uw vingers uit de buurt van het afnamegedeelte. Gevaar voor verwonding doordat u zich aan de naald prikt. Deksel met geïntegreerd afnamegedeelte en transfereenheid direct in een geschikte afvalbox doen.

**Attenzione:** Non toccare l'unità di prelievo. Pericolo di puntura. Smaltire immediatamente il coperchio con l'unità di prelievo integrata e il dispositivo di trasferimento in un contenitore idoneo.

**Precaución:** Mantenga los dedos alejados de la zona de obtención de muestras. Existe riesgo de pincharse con la aguja. Introduzca inmediatamente en un recipiente para residuos adecuado la tapa con zona de obtención de muestras integrada, así como la unidad de transferencia.

**Atenção:** Manter os dedos afastados da zona de obtenção da amostra. Existe o risco de ser picado pela agulha. Imediatamente após a coleta da amostra, colocar a tampa, o dispositivo e a unidade de transferência num contentor para descartáveis.

Seitens der Hersteller und Zulieferer: Technische Änderungen vorbehalten. Sous réserve de modifications techniques. Technische Änderungen vorbehalten. Con riserva di modifiche tecniche. Modificazioni tecniche riservate. Reservados los cambios técnicos.

info@sarstedt.com · www.sarstedt.com



STERILE R



SARSTEDT

SARSTEDT AG & Co. · Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht · Telefon (+49) 0 22 93 30 50 · Telefax (+49) 0 22 93 305-282 · Service 0800 (Deutschland) · Telefon (0800) 0 83 30 50